


Etape 1

- A l'aide du robinet blanc (Trois voies ouvertes, 4^{ème} OFF), mettre le bouchon rouge en contact avec le capteur de pression. Par cette manipulation, le capteur de pression est en contact avec l'air ambiant, donc la pression atmosphérique.

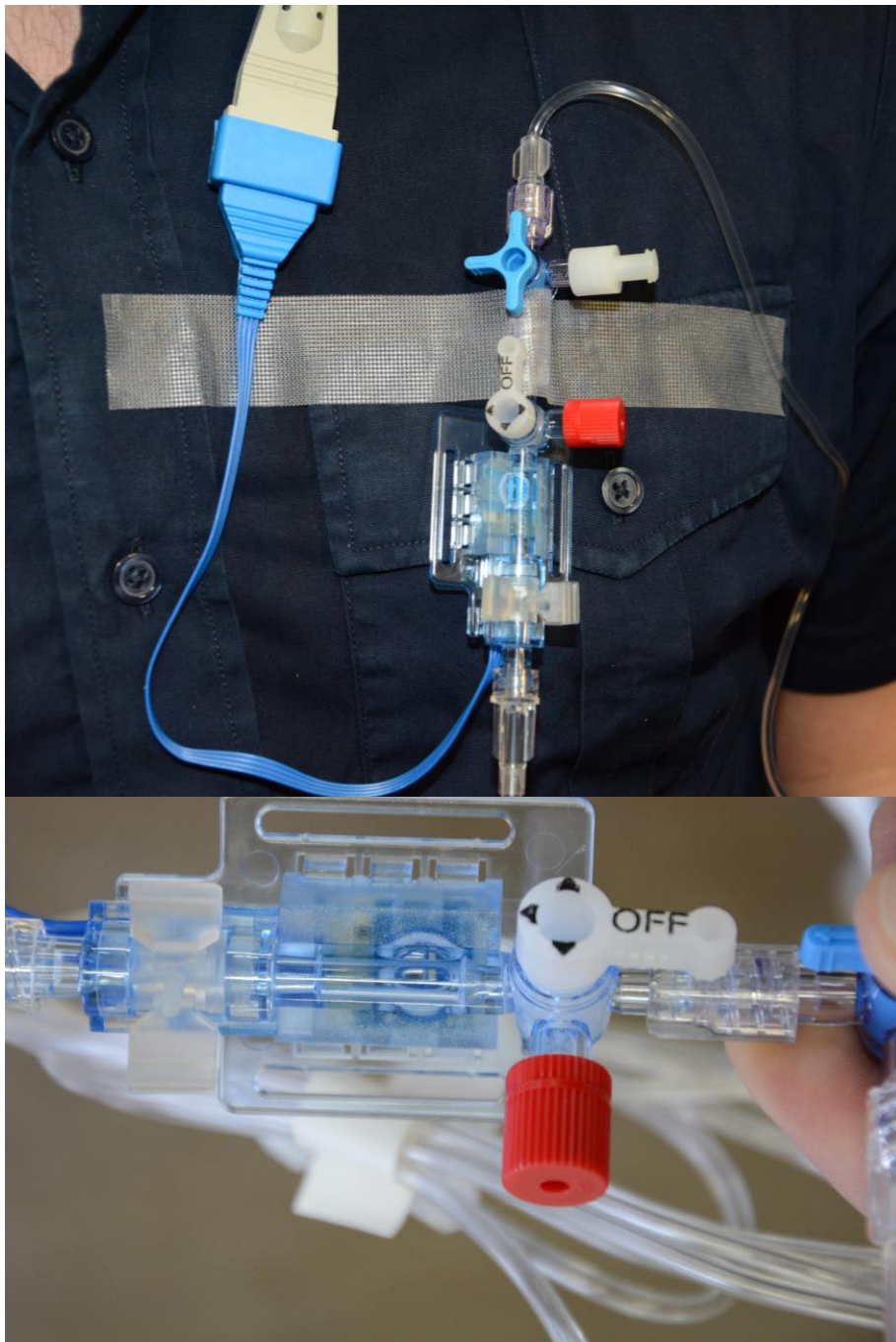

Etape 2

- Passer en mode manuel
- Sur le moniteur, sélectionner « ZERO SONDE » en bas à gauche (A)
- Une fenêtre s'ouvre, choisir à nouveau « ZERO SONDE » (B)
- Apparaissent successivement les messages : « ZERO EN COURS » (C), « MIS à ZERO » (D), puis retour à la valeur de TA (E)

